

## Программа для работы с данными блокнота кондуктометра МАРК-603 mark603view

Чтобы установить программу **mark603view**, скопируйте на Ваш ПК папку МАРК-603. Запуск программы осуществляется посредством двойного «клика» файла mark603view.exe из этой папки. Файл mark603.ini предназначен для сохранения настроек программы.

Программа **mark603view** позволяет, подключив кондуктометр МАРК-603 по кабелю связи К-603 к COM-порту ПК, **работать с папками, с записями, а также настраивать параметры программы.**

Блокнот кондуктометра МАРК-603 – это набор записей (до 100), которые располагаются в поименованных Пользователем папках. Изначально в блокноте присутствует папка с названием «Общая папка».

Пользователь может по своему усмотрению создавать, переименовывать, очищать, удалять папки в блокноте.

**ВАЖНО:** Обмен данными между ПК и блокнотом МАРК-603 происходит только в режиме «Измерение»!

### Регистрация Пользователя

После запуска программы открывается окно «Регистрация». Процедура регистрации позволяет идентифицировать Пользователя при сохранении данных блокнота в Exel-совместимый файл или при выводе их на печать.

Вы можете ввести ФИО нового Пользователя непосредственно в окне «Регистрация». После этого автоматически откроется окно «Настройки», в котором Вы можете сохранить новое имя в списке Пользователей.

Вы можете войти в программу «без имени» - для этого необходимо установить маркер на пустой строке (последней в окне регистрации).

### Работа с папками

Для работы с папками необходимо перейти на страницу «Управление папками», нажав на иконку




вертикального меню или выбрав соответствующий пункт меню «Файл». Чтобы открыть контекстное меню работы с папками, «кликните» правой клавишей мыши. Выберите соответствующий пункт. Действуйте в соответствии с указаниями программы.

#### Замечания и ограничения:

- «Общая папка» не может быть удалена или переименована!
- При создании папок помните, что общее количество папок ограничено следующим правилом: суммарное количество символов в именах папок не может превышать 126. При превышении данного количества символов программа выдаст предупреждение.
- Изменения, производимые Пользователем в окне «Управление папками», относятся к данным, скопированным в память компьютера. Для передачи данных из памяти компьютера

в блокнот прибора нажмите клавишу «Синхронизировать»

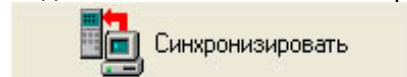

Вы можете это делать после каждой манипуляции с папками (рекомендуется) или один раз в конце всех изменений, производимых в данном окне.



- Если во время сеанса связи прибора и ПК были произведены изменения в блокноте, для отображения обновленных данных блокнота на мониторе ПК необходимо произвести



операцию «Прочитать данные блокнота», кликнув иконку



в вертикальном меню.

## Работа с записями:

1. Вы можете просматривать записи блокнота, отсортировав их «по папкам»  или «по дате/времени»  (кликните на соответствующую иконку в вертикальном меню или выберите пункт в горизонтальном меню «Данные»).

2. Вы можете выделить записи (при нажатой левой клавише мыши) и пометить их «на сохранение в файл»  или «на печать»  (нажав соответствующую иконку в нижней части страницы). Для

выполнения действия необходимо нажать клавишу «ВЫПОЛНИТЬ»



Выполнить

### При сохранении записей в память компьютера:

В открывающемся диалоговом окне Вы можете указать:

- имя файла,
- тип файла: текстовый \*.csv или текстовый \*.txt.

#### Замечания и ограничения:

- Текстовый файл \*.csv совместим с приложением MS Excel. Это обстоятельство позволяет использовать широкие возможности MS Excel в обработке информации: построение графиков, сортировки, фильтрации и т.д.
- При сохранении записей в уже имеющийся файл удостоверьтесь, что добавление происходит из аналогичного режима просмотра («по папкам» или «по дате/времени»).
- В случае регистрации Пользователя при запуске программы его ФИО будут автоматически заноситься в файл.

### При выводе записей на печать:

В открывающемся диалоговом окне Вы можете задать имя принтера, количество копий, выводимых на печать, а также воспользоваться вкладкой «Свойства» для задания параметров печати.

#### Замечания и ограничения:

- В случае регистрации Пользователя при запуске программы его ФИО будут автоматически выводиться на печать.

## Настройка параметров программы



1. Отображение данных блокнота в режимах «по папкам/по датам» - просто установите в разделе «Отображение данных блокнота» «флажки» в полях для вывода.
2. Настройка стартовой страницы позволяет установить страницу, с которой начнет свою работу программа.
3. Список Пользователей может изменяться путем добавления/удаления строк, при этом в списке должен присутствовать хотя бы один пользователь

Для добавления Пользователя введите Фамилию Имя и Отчество в средней колонке и нажмите клавишу «Добавить».

Для удаления имени Пользователя из списка Пользователей выделите строку с его именем в разделе «Список работников» и нажмите клавишу «Удалить».

При изменении параметров настройки следует сохранить изменения, нажав кнопку



Сохранить настройки